


**BRUXI+ ist eine Soforthilfe gegen das Zähneknirschen und hilft bei Kiefergelenkproblemen bei Kindern im Alter von 3-12 Jahren.**

Der konturlose BRUXI+ ist einem Abdrucklöffel ähnlich und hat die äußere Form einer individuell herzustellenden Schiene. Dazu wird mit einem schnell härtenden Silikon „DIRECT für BRUXI+“ eine Abformung unmittelbar im Mund des Patienten oder anhand eines Kiefermodells vorgenommen.

BRUXI+ gibt es nur in einer Größe für den Unterkiefer.

Für die Anwendung im Milchgebiss ist die Silikonschiene mit der Schere um ca. 1 cm auf jeder Seite zu kürzen. An der Außen- und Innenfläche ist deshalb eine feine, schräg nach vorn verlaufende Markierung eingearbeitet.

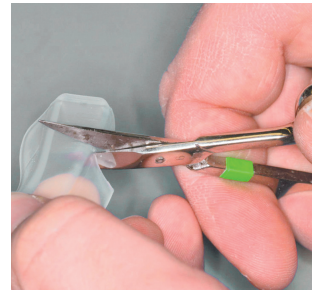

**Kürzen der Schiene**



**1 Einstreichen mit  
SILCOfix**



**2 Einfüllen des „DIRECT“-  
Silikons**



**3 Abformung  
(auf dem Modell/Kiefer)**

Vor dem „Abdruck“ sind die Innenseiten und die Ränder des BRUXI+ mehrfach großzügig mit SILCOfix einzustreichen.

Die Aushärtezeit im Mund beträgt nur ca. 90 sec., während sie auf dem Kiefermodell ca. 3 Min. benötigt. Nach ca. 5 Min. können Überschüsse mit einer Schere abgeschnitten und eine Randglättung mit Sandpapier-Kappen vorgenommen werden.



**Ergebnis der Abformung**

**Weitere Fragen oder Probleme? Wir beraten Sie gerne.**



**Dr. Hinz Dental-Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG**

Postfach 10 14 25 | 44604 Herne

Tel. 0 23 23/59 34 20 | Fax 0 23 23/59 34 29

info@dr-hinz-dental.de | www.dr-hinz-dental.de

# BRUXI+


## Instructions for use for the production of a night guard

**BRUXI+ is an immediate help against teeth grinding and also helps 3- to 12-year-old children with mandibular joint problems.**

The contourless BRUXI+ resembles an impression tray and has the external appearance of a splint that can be made individually. For this purpose, an impression is made directly in the patient's mouth or with a jaw model using "DIRECT for BRUXI+" – a fast hardening silicone.

Bruxi+ is available in only one size for the lower jaw.

For use in milk teeth, cut about 1 cm of each side of the silicone splint with scissors. For this reason, a fine marking extending diagonally forward has been incorporated.

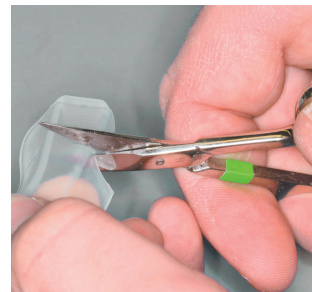

**Shortening the Bruxi+**



**1 Seal it with SILCOfix**



**2 Fill it with the DIRECT silicone**



**3 Impression  
(on the model or jaw)**

Before the „impression“ is made, the inner sides and edges of BRUXI+ have to be generously sealed several times with SILCOfix.

It hardens in the mouth after only about 90 seconds; if the jaw model is used, it takes about 3 minutes. After approx. 5 minutes, the excess material can be cut off with scissors and the edges smoothed out with sanding discs.



**Result of the impression**

**Further questions or problems? We will be happy to advise you.**



**Dr. Hinz Dental-Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG**

Postfach 10 14 25 | 44604 Herne

Tel. 0 23 23/59 34 20 | Fax 0 23 23/59 34 29

info@dr-hinz-dental.de | www.dr-hinz-dental.de